



Sistema Auto CPAP M1 Mini



Viaje tão livre quanto a brisa

BMC Medical Co., Ltd.


Room 110, Tower A Fengyu Building, No. 115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-22-8293 9881 Fax: +86-22-8293 9881 ext. 810 intl@bmc-medical.com <https://en.bmc-medical.com/>

Specifications are subject to change without notice.

V1.0_SC-A-202206019

Imagine uma riqueza de cenários de viagem

O BMC M1 Mini é um dispositivo CPAP de viagem com ajuste automático de pressão projetado para o tratamento do ronco e da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS). É tão pequeno e leve que pode ser levado para praticamente qualquer lugar!

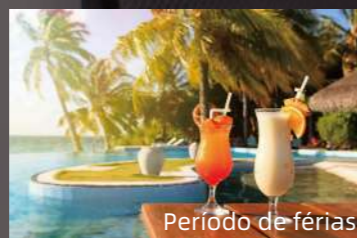

Um design moderno e minimalista que redefine o "Mini CPAP"



Anel de tira de luz colorida

Experimente feedback em tempo real através de flashes de cores do dispositivo.

Projeto antiderrapante

Os quatro pés de borracha antiderrapantes na base do dispositivo reduzem efetivamente o movimento durante a terapia.

Tamanho do dispositivo


Dimensão: 159 mm x 66 mm x 72 mm (6,26 pol. x 2,60 pol. x 2,83 pol.)

Peso: < 400 g



Sensibilidade de ajuste de pressão

Três níveis de sensibilidade ajustável, Standard, Soft e Female para terapia personalizada.

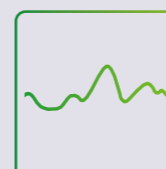

Recurso de Smart A/C

Usando a tecnologia inteligente de ajuste de pressão, o dispositivo M1 Mini pode alterar automaticamente os parâmetros de pressão de tratamento para se adaptar às mudanças de estilo de vida do usuário. Certifique-se de que a melhor terapia seja administrada todas as noites.




Lembrete de acessórios

Defina lembretes de substituição para os acessórios, incluindo filtro de ar, HME, máscara e tubo de respiração para garantir o desempenho ideal.





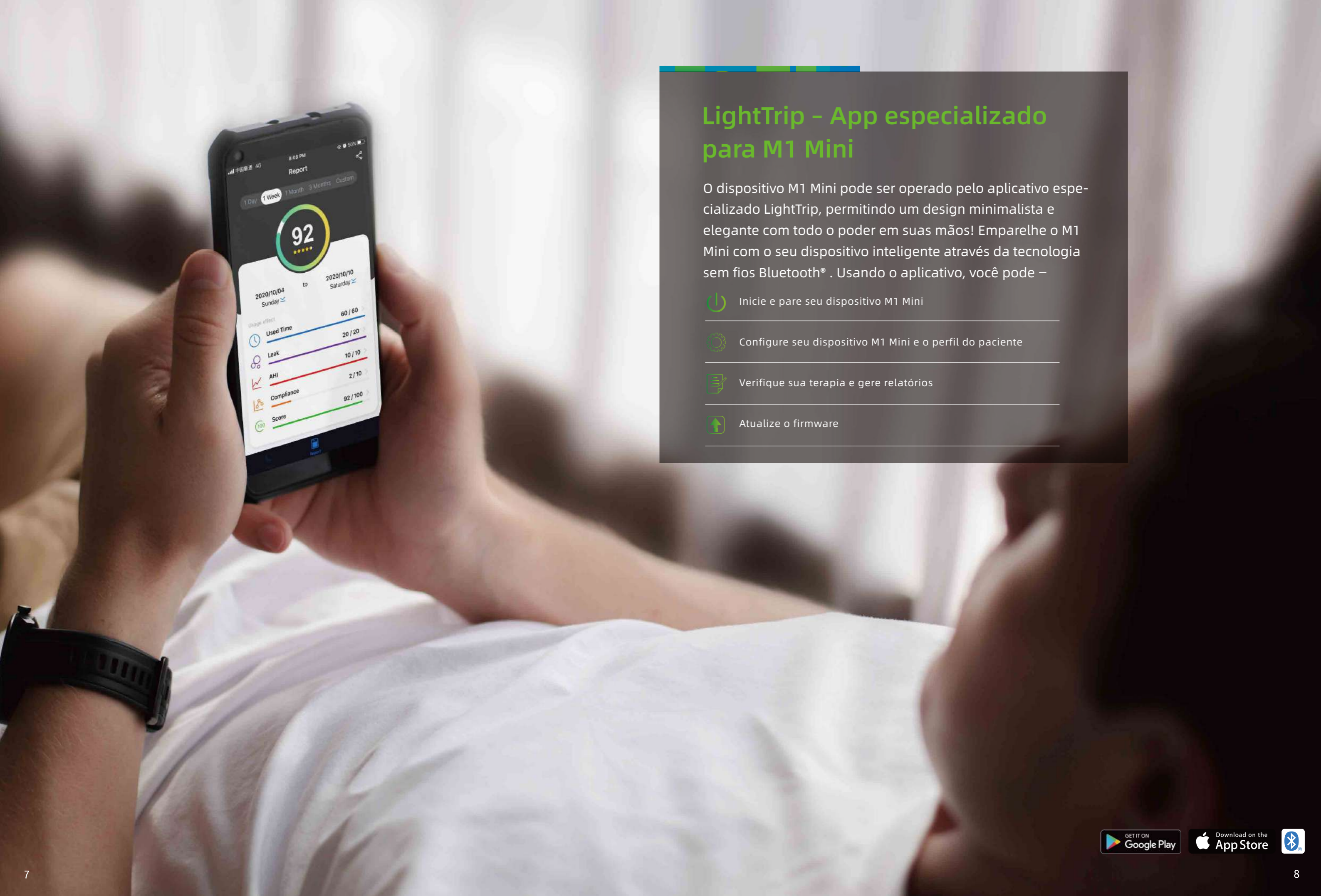

Lembrete de manutenção

Defina um lembrete de manutenção de 180 dias ou 360 dias para manter seu dispositivo M1 Mini em ótimas condições.



LightTrip - App especializado para M1 Mini

O dispositivo M1 Mini pode ser operado pelo aplicativo especializado LightTrip, permitindo um design minimalista e elegante com todo o poder em suas mãos! Emparelhe o M1 Mini com o seu dispositivo inteligente através da tecnologia sem fios Bluetooth®. Usando o aplicativo, você pode –

-  Inicie e pare seu dispositivo M1 Mini
-  Configure seu dispositivo M1 Mini e o perfil do paciente
-  Verifique sua terapia e gere relatórios
-  Atualize o firmware



Disponível com uma variedade de máscaras Moisture Exchanger da BMC

Em comparação com a máscara convencional, a máscara de umidificação sem água melhora significativamente para a conveniência do usuário, convertendo o complicado umidificador aquecido em um kit Moisture Exchanger integrado na máscara. Não poderia ser melhor para o usuário que costuma viajar com frequência.

*Todas as portas de conexão são padrão, compatíveis com máscaras CPAP padrão. Para garantir que você receba a terapia segura e eficaz, é melhor usar os acessórios da BMC.



HU / HU-Plus

O Moisture Exchanger como o ponto chave no sistema de umidificação sem água permite que o ar inalado passe e melhore seu nível de calor e umidade para fornecer uma terapia portátil confortável.



*Por favor, substitua-o a cada 30 dias.

O HU é capaz de atender a maioria dos seus requisitos e o HU -Plus melhorará ainda mais o nível de calor e umidade, o que será útil para o uso em áreas de alta altitude e aeronaves.



Filtro para máscara de umidificação sem água

O filtro mantém a poeira longe das vias aéreas e mantém o silêncio para um sono melhor.

*Por favor, substitua-o a cada 30 dias.



Máscara de travesseiros nasais P2H

Área de contato menor, experiência mais confortável.



Máscara nasal N5H

Com a almofada AutoFit leve e inteligente projetada com anhuradas, ela se adapta melhor ao seu rosto.



Máscara nasal N5AH

Com base no design sem moldura na testa, os usuários podem desfrutar de uma melhor visão.



Filtro de ar

- Filtra eficazmente poeira, pólen e outros alérgenos encontrados no ar.
- Limpe e substitua o filtro regularmente.

Trocador de umidade

- A umidificação sem água mantém a respiração quente e úmida.
- 2 tipos de trocador de umidade disponíveis, HU e HU-Plus.
- Conveniente e rápido de usar e substituir.



Maleta

- Arranjo de espaço razoável
- Conveniente para transportar
- Fornece proteção eficaz para M1 Mini



Saco de armazenamento

- Material macio
- Projeto do compartimento
- Portátil e conveniente



Tubulação de ar

- 15 / 22 mm opcional

Especificações

| | |
|--|--|
| Âmbito de aplicação | Adequado para o tratamento do ronco e síndrome da apnéia e hipópnéia obstrutiva do sono (SAHOS). |
| Tamanho do dispositivo | Dimensões: 159 mm x 66 mm x 72 mm (6,26 pol. x 2,60 pol. x 2,83 pol.) Peso: < 400 g |
| Modo de trabalho | CPAP, AutoCPAP |
| Varição de pressão | 4 - 20 hPa |
| Precisão de pressão | ± 0,5 hPa |
| Sensibilidade à Pressão | Padrão / Suave / Fêmea |
| A/C inteligente | Sim |
| Tempo de rampa | 0 - 60 min / Automático |
| Reslex (Liberação de Pressão de Expiração) | Desligado, Nível 1 - 3 |
| Ligar automaticamente | Sim |
| Desligamento automático | Sim |
| Tipo de Trocador de Umidade | Nenhum / HU (Normal) / HU-Plus (Aprimorado) |
| Alerta de vazamento | Sim |
| Lembrete de acessórios | Sim |
| Compensação Automática de Vazamento | Sim |
| Atualização de firmwar por aplicativo | Sim |
| Transmissão de dados sem fio | Sim |
| Nível de pressão sonora | < 30 dB, quando o aparelho estiver trabalhando na pressão de 10 hPa. |
| Consumo de energia CA | 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz, 1,0 A máx. |
| Entrada do dispositivo | 19 V, 1,26 A |
| Maleta | Opcional |

